

可根据光轴调整透镜中心位置和调整焦点位置的透镜镜架。
耐震动，高稳定的低光轴用底板型镜架。

- 还备有可调整倾斜角度的五轴透镜镜架（ALHN-5），它可用于微调精密透镜的波面收差或光斑内的能量分布。
- 使用上面的手柄转动镜筒，可实现镜筒的前后移动，调整透镜的焦点位置。
- 调芯部采用了螺母锁紧机构，调焦部使用螺钉锁紧。
- 除单透镜外，也可以安装厚透镜或厚度为小于28mm的组合镜筒。



信息

- ▶ 还有没有调焦机构的，仅可调芯的镜架。 [参照](#) C040
- ▶ 可提供固定小于φ20mm的透镜的可调芯镜架（LHCM）。
- ▶ 如希望定制光轴高度，欢迎咨询。


注意

- ▶ 往镜筒内固定透镜时，请使用附属的垫圈（2种）。镜筒的长度有28mm，仅用螺纹环固定会很费时间。同时如果改变隔圈和透镜的相对位置，也可以改变透镜的位置。
- ▶ 透镜的焦距很大，可调焦的范围不够时，可使用长孔补充可调范围。




外形图

ALHN-3 内六角螺栓 M6×10...3个

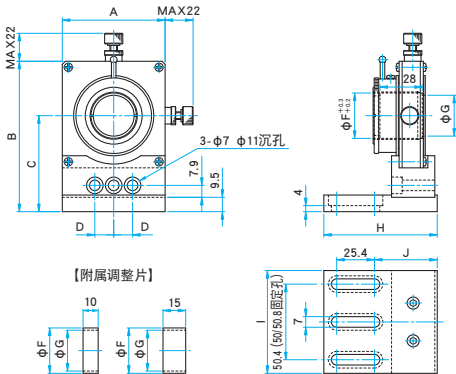

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	φF (mm)	φG (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
ALHN-25-3	68	99.5	63.5	12.5	φ25	φ22	75	68	41.3
ALHN-25.4-3	68	99.5	63.5	12.5	φ25.4	φ22	75	68	41.3
ALHN-30-3	68	99.5	63.5	12.5	φ30	φ27	75	68	41.3
ALHN-50-3	88	122.2	76.2	25	φ50	φ46	95	75	59.8
ALHN-50.8-3	88	122.2	76.2	25	φ50.8	φ46	95	75	59.8

ALHN-5 内六角螺栓 M6×10...3个

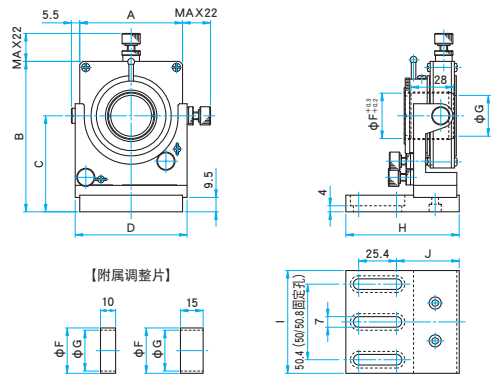

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	φF (mm)	φG (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
ALHN-25-5	68	99.5	63.5	74	φ25	φ22	75	68	41.3
ALHN-25.4-5	68	99.5	63.5	74	φ25.4	φ22	75	68	41.3
ALHN-30-5	68	99.5	63.5	74	φ30	φ27	75	68	41.3
ALHN-50-5	88	122.2	76.2	94	φ50	φ46	95	75	59.8
ALHN-50.8-5	88	122.2	76.2	94	φ50.8	φ46	95	75	59.8

三轴可调 (底板型)							主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化	
型号	适用元器件外径 (mm)	适用元器件厚度 (mm)	调芯范围 (mm)	调芯分辨率 (mm/周)	调焦范围 (mm)	自重 (kg)		
ALHN-25-3	φ25	0~28	φ6	0.25	±3	0.49		
ALHN-25.4-3	φ25.4	0~28	φ6	0.25	±3	0.49		
ALHN-30-3	φ30	0~28	φ6	0.25	±3	0.49		
ALHN-50-3	φ50	0~28	φ6	0.25	±3	0.78		
ALHN-50.8-3	φ50.8	0~28	φ6	0.25	±3	0.78		

五轴可调（底板型）										主要材料：铝合金 表面处理：黑色氧化	
型号	适用元器件 外径 〔mm〕	适用元器件 厚度 〔mm〕	调芯范围 〔mm〕	调芯分辨率 〔mm/周〕	角度范围 俯仰 〔°〕	角度范围 方位 〔°〕	角度分辨率 俯仰 〔°/周〕	角度分辨率 方位 〔°/周〕	调焦范围 〔mm〕	自重 〔kg〕	
ALHN-25-5	φ 25	0~28	φ 6	0.25	±4	±4	约0.5	约0.5	±3	0.5	
ALHN-25.4-5	φ 25.4	0~28	φ 6	0.25	±4	±4	约0.5	约0.5	±3	0.5	
ALHN-30-5	φ 30	0~28	φ 6	0.25	±4	±4	约0.5	约0.5	±3	0.5	
ALHN-50-5	φ 50	0~28	φ 6	0.25	±3	±3	约0.36	约0.36	±3	0.75	
ALHN-50.8-5	φ 50.8	0~28	φ 6	0.25	±3	±3	约0.36	约0.36	±3	0.75	

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

反射镜

透镜

棱镜

偏光镜

激光器

光束整形

滤光片

快门

其它

光纤