



► 手动平台 ► 细窄平台、交叉滚柱平台 | 产品清单

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件

固定平台
薄型 V B 平台
微型平台
螺丝式平台
平台 齿条齿轮
高级平台
平台 交叉滚柱、 Z 升降平台、 旋转平台
倾斜平台
平台 倾斜旋转
X Z、 Y Z 平台
X Y Z 平台

页	产品参考照片	种类	产品编号	产品编号	产品编号	平台面
330		X 平台	LS-947-C1	LS-947-S1	LS-947-R1	90mm×90mm
332		XY 平台	LD-947-C1	LD-947-S1	LD-947-R1	90mm×90mm
334		Z 平台	LZ-947-S1	LZ-947-R1	-	90mm×90mm
336		XYZ 平台	LT-907-S1	LT-907-R1	-	90mm×90mm
		XYZ 旋转平台	TR-907-S1	TR-907-R1	-	φ 90mm
338		X 平台	LS-149-C1	LS-149-S1	LS-149-R1	125mm×125mm
			LS-149-C7	LS-149-S7	-	125mm×125mm
340		XY 平台	LD-149-C1	LD-149-S1	LD-149-R1	125mm×125mm
			LD-149-C7	LD-149-S7	-	125mm×125mm
342		Z 升降平台	LV-147-1	LV-147-6	LV-147-7	125mm×125mm
344		XYZ 平台	LT-140-S1	LT-140-R1	-	125mm×125mm
		XYZ 旋转平台	TR-101-S1	TR-101-R1	-	φ 125mm

346		X 平台	LS-241-C1	LS-241-S1	LS-243-C7	125mm×150mm
		XY 平台	LD-241-C1	LD-241-S1	LD-243-C7	125mm×150mm
348		X 平台	LS-242	LS-242-MSD	-	130mm×200mm
		XY 平台	LD-242	LD-242-MSD	-	130mm×200mm



特长 | 细窄平台、交叉滚柱平台 ◀ 手动平台 ◀

■ 细窄平台

◆ 交叉滚柱方式

移动导轨使用 V 型槽与交叉滚柱（V-CR 方式）。

◆ 操作部位置的衍生型号

根据操作部（千分尺测量头）的位置，可选择中心、侧面、相反侧面。

◆ 90mm×90mm 与 125mm×125mm

有铝合金制的 90mm×90mm 的产品、钢制的 125mm×125mm（仅限 X 平台 /XY 平台）的产品。

■ 交叉滚柱平台

◆ 交叉滚柱方式

移动导轨使用 V 型槽与交叉滚柱（V-CR 方式），可广泛用于精密定位及测量机的试料台等。

◆ 钢制的平台本体

为提高精度与刚性，平台本体使用钢材，采用矩形的平台面。

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
固定平台
薄型 V 型 平台
微型平台
螺旋式平台
齿条齿轮 平台
高级平台
交叉滚柱、 细窄平台、 Z 平台
Z 升降平台、 旋转平台
倾斜平台
倾斜旋转 平台
Y Z 平台、 X Z 平台
X Y Z 平台

- 自动平台
- 显微镜用
自动化产品
- 手动平台
- 平台用附件
- 固定平台
- 薄型 V B
平台
- 微型平台
- 螺丝式平台
- 齿条齿轮
平台
- 高级平台
- 交叉滚柱、
细窄平台、
Z 升降平台、
旋转平台
- 倾斜平台
- 倾斜旋转
平台
- X Z、
Y Z 平台
- X Y Z 平台


XY 细窄平台 90×90

V - C R
方 式


下载

2DCAD


3DCAD

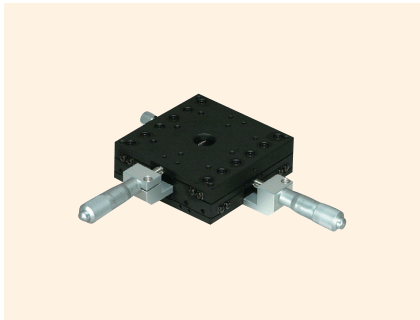

↑ LD-947-C1

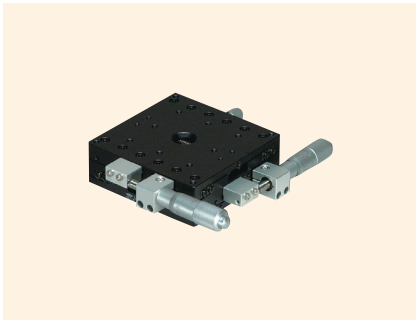

↑ LD-947-S1

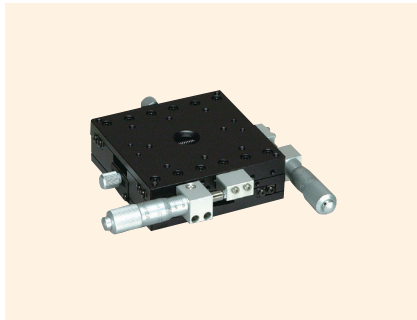

↑ LD-947-R1

特 长 Sales Point


- 移动导轨使用 V 型槽与交叉滚柱（V-CR 方式）的薄型轻量的平台。
- 操作部安装位置有中央、侧面、相反侧面。
- 可广泛用于工件的精密定位、测量机的试料台等。

产 品 编 号	LD-947-C1	LD-947-S1	LD-947-R1
产 品 名	X-Y 轴细窄平台 90×90		
移 动 方 向	XY 轴 2 方向		
平 台 面	90mm×90mm		
夹 紧 方 式	板夹		
操 作 部 安 装 位 置	中心	侧面	相反侧面
进 给 方 式	MHM1-15（标准千分尺）		
移 动 量	±7.5mm		
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.5mm		
分 度 值	千分尺式 0.01mm		
灵 敏 度	0.003mm		
移 动 导 轨	V 型槽与交叉滚柱		
移 动 精 度	真直度 0.003mm		
X Y 正 交 度	0.02mm		
承 重	78.4N（8kgf）		
质 量	0.85kg		
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底		




细窄平台、交叉滚柱平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

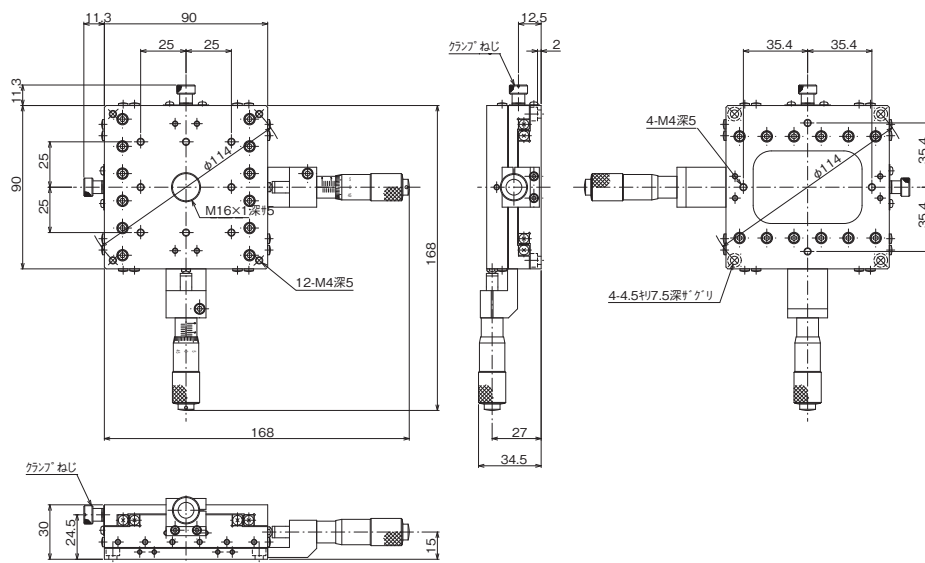

↑ LD-947-C1

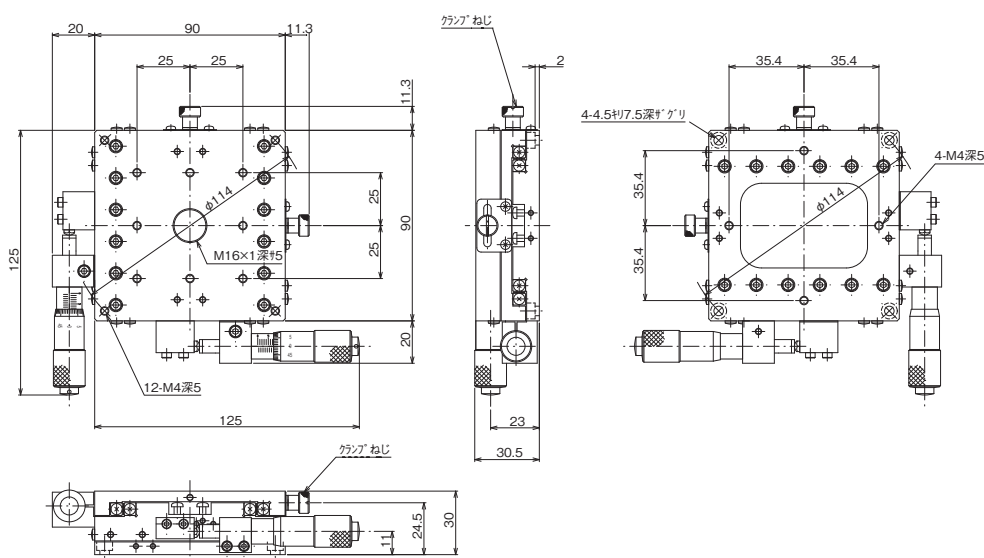

↑ LD-947-S1

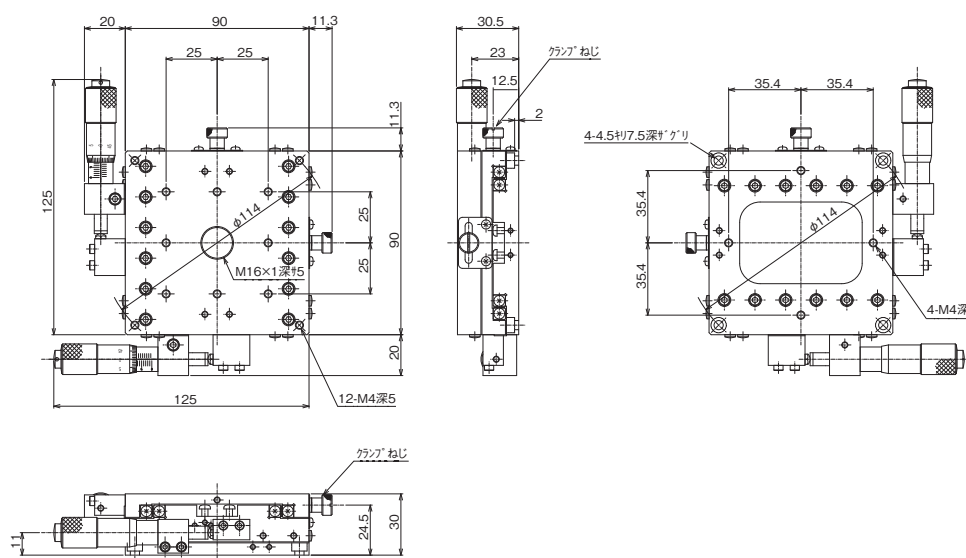

↑ LD-947-R1

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固装平台

平台	薄型 VB
----	----------

微型平台

螺丝式平台

齿条齿轮
平台

高级平台

平台

Z 平台

旋转平台

傾斜平

平台

Y
Z
Σ

	X	Y	Z
--	---	---	---

XY 细窄平台 125×125




下载




2DCAD


3DCAD

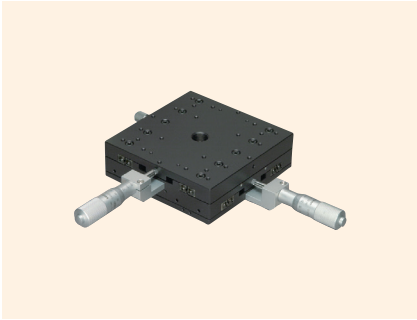

LD-149-C1

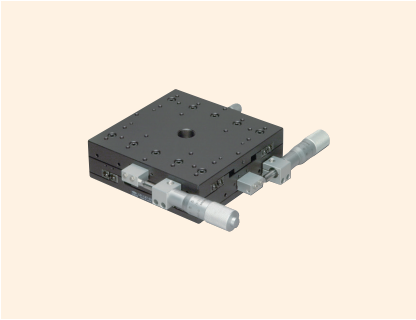

LD-149-S1

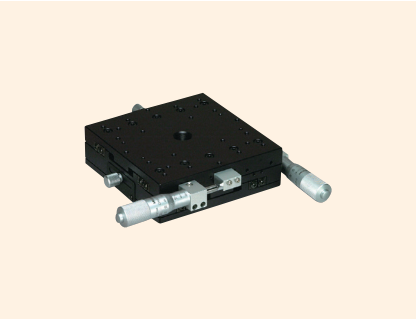

LD-149-R1

特 长 Sales Point

- 移动导轨使用 V 型槽与交叉滚柱（V-CR 方式）的薄型平台。
- 操作部安装位置有中央、侧面、相反侧面。
- 可广泛用于工件的精密定位、测量机的试料台等。


产 品 编 号	LD-149-C1	LD-149-S1	LD-149-R1
产 品 名	X·Y 轴细窄平台 125×125（铁制）		
移 动 方 向	XY 轴 2 方向		
平 台 面	125mm×125mm		
夹 紧 方 式	板夹		
操 作 部 安 装 位 置	中心	侧面	相反侧面
进 给 方 式	MHN1-25T（标准千分尺）		
移 动 量	±12.5mm		
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.5mm		
分 度 值	千分尺式 0.01mm		
灵 敏 度	0.003mm		
移 动 导 轨	V 型槽与交叉滚柱		
移 动 精 度	真直度 0.003mm 横摆·俯仰 15sec		
力 矩 刚 性	横摆刚性 0.05sec/N·cm、俯仰刚性	0.05sec/N·cm、翻滚刚性	0.03sec/N·cm
平 行 度	0.05mm		
X Y 正 交 度	0.02mm		
承 重	225N（23kgf）		
质 量	4.3kg		
主 要 材 质 / 表 面 处 理	钢材 / 硬质黑色铬		

产 品 编 号	LD-149-C7	LD-149-S7
产 品 名	X·Y 轴细窄平台 125×125 （带数字显示式千分尺）（铁制）	
移 动 方 向	XY 轴 2 方向	
平 台 面	125mm×125mm	
夹 紧 方 式	板夹	
操 作 部 安 装 位 置	中心	侧面
进 给 方 式	MHN1-25MX（数字显示式千分尺）	
移 动 量	±12.5mm	
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.5mm	
分 度 值	数字显示式千分尺 0.001mm	
灵 敏 度	0.003mm	
移 动 导 轨	V 型槽与交叉滚柱	
移 动 精 度	真直度 0.003mm 横摆·俯仰 15sec	
力 矩 刚 性	横摆刚性 0.05sec/N·cm、俯仰刚性	0.05sec/N·cm、翻滚刚性 0.03sec/N·cm
平 行 度	0.05mm	
X Y 正 交 度	0.02mm	
承 重	225N（23kgf）	
质 量	4.5kg	
主 要 材 质 / 表 面 处 理	钢材 / 硬质黑色铬	




细窄平台、交叉滚柱平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

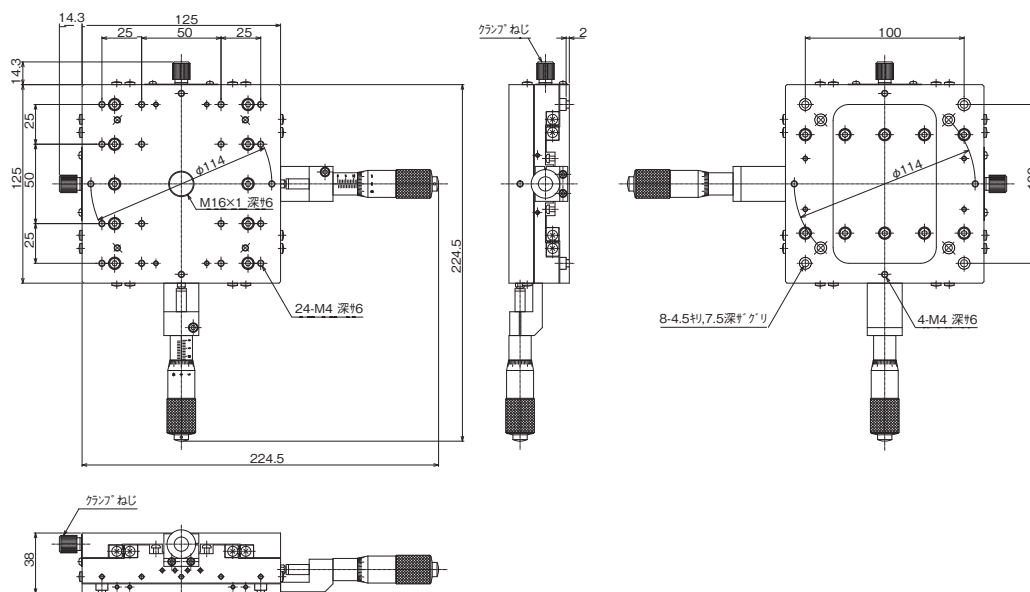

LD-149-C1

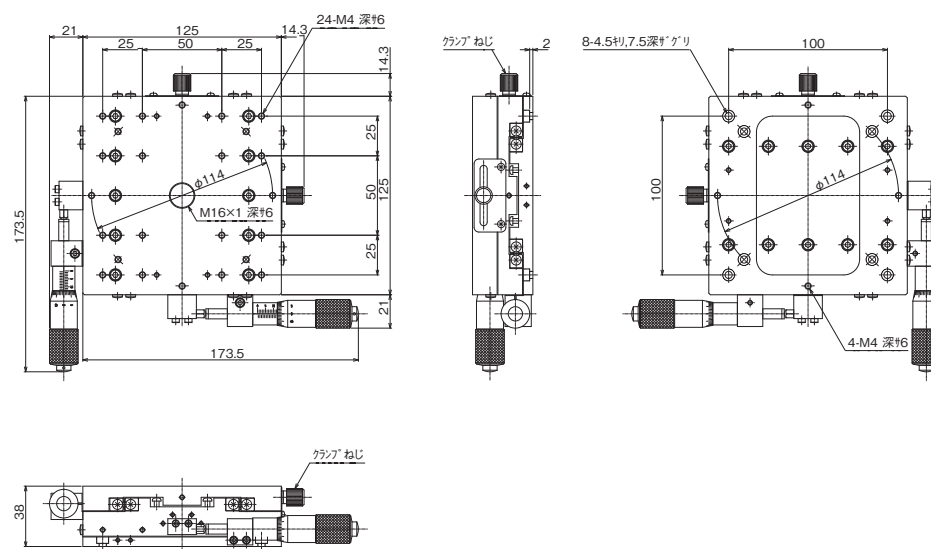

LD-149-S1

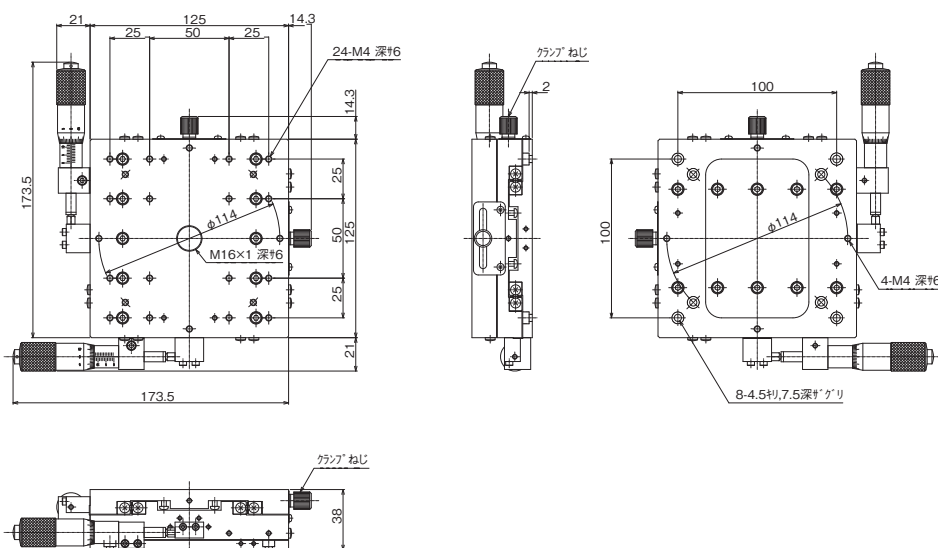

LD-149-R1

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V8

微型平台

螺丝式平台

齿条齿
轮

高级平台

细窄平台、
交叉滚柱

Z升降平台

旋转平台

倾斜平台

倾斜旋转
平台

XYZ平台

XYZ平台